


离心管 (15 ml & 50 ml)

PakGent 离心管由高纯度聚丙烯制成，采用我们先进的工艺注塑成型，实现高效稳定离心。附带可回收塑料架，环保，洁净。采用市面上较大的书写区，结合特殊工艺，有效防止喷射酒精时稀释笔记。




产品特点

特点	描述
材料	聚丙烯(PP), USP class IV
离心力	锥底15,000 xg, 可立底3,500 xg
建议温度范围	-80~121°C
无菌等级	SAL=10 ⁻⁶
盖子颜色	浅蓝色

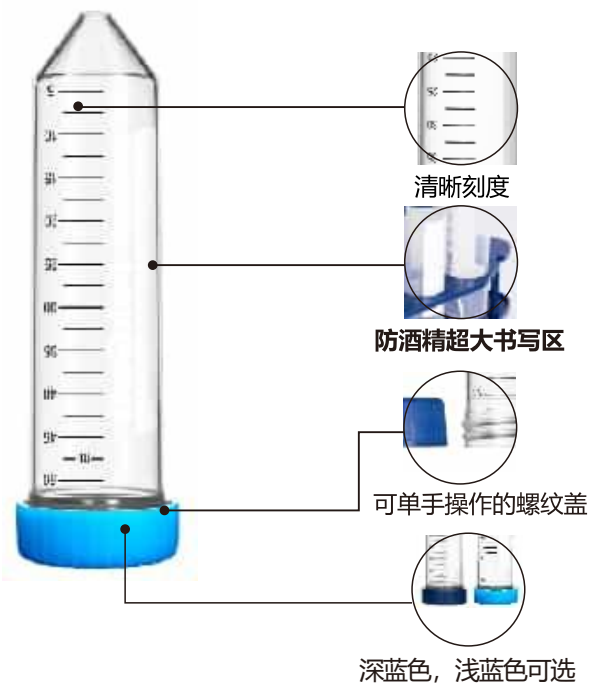

壁厚均匀, 离心效果稳定

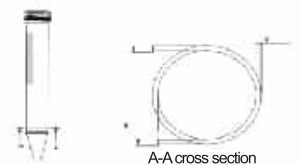


密封性袋装, 方便实验室使用



符合人体工程学的塑料架, 支持重复使用, 使实验操作更洁净安全。有15毫升和50毫升两种尺寸可供选择。




尺寸信息

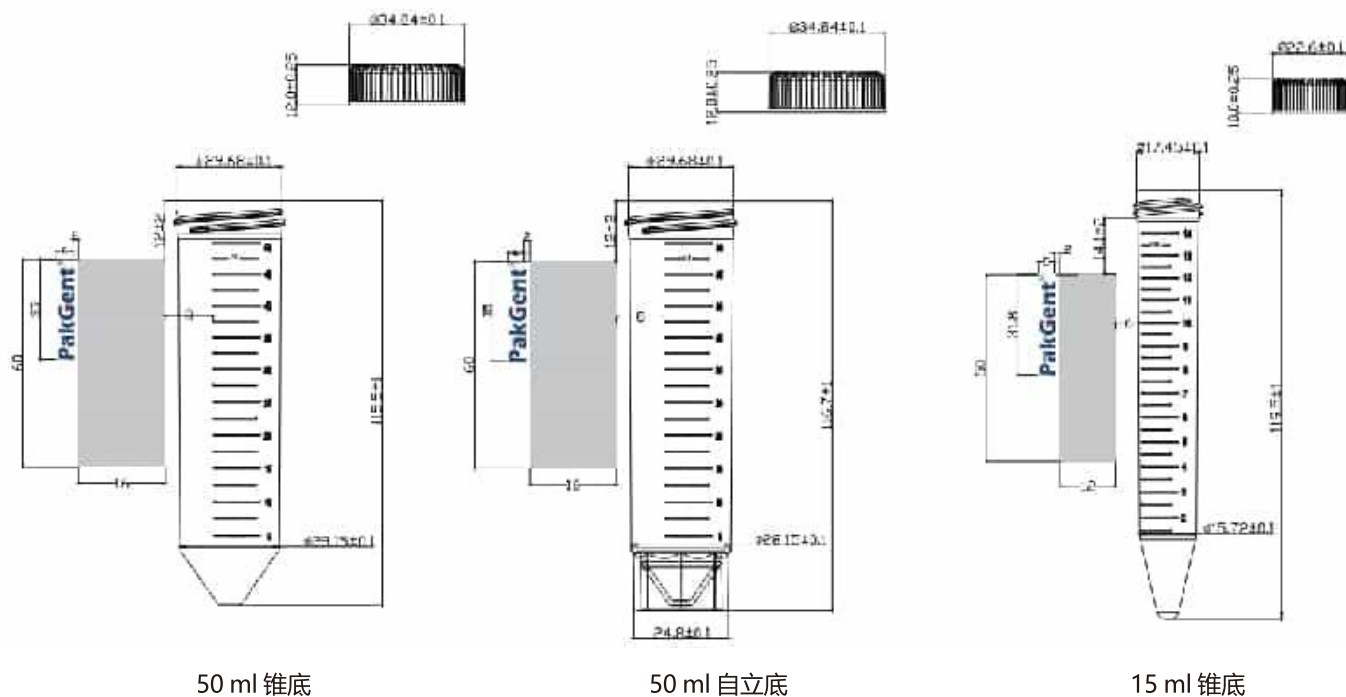

注意事项

- 经测试，PakGen离心管刻度线为准确的，但我们仍强烈建议离心管刻度线仅作为实验参考，如实验需要精准定容量，建议使用专业测量工具。
- 为确保离心效果，建议使用离心管高速离心时，液面不要超过容量的80%。

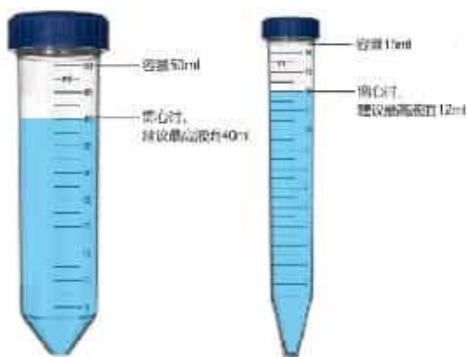

- 为防止管子变形，高温高压灭菌时，建议将盖子打开。
- 为保证低温存储效果，建议低温存储时使用密封膜将盖子跟管子连接处密封。
-

订购指南

货号	描述	包装规格	产品图片
CT50R-L	50 ml 锥底离心管, 防酒精磨砂款, 浅蓝盖, 架装, 15,000 xg	25支/架, 20架/箱	 注: 图片仅供参考, 请以实物为准
CT50B-L	50 ml 锥底离心管, 防酒精磨砂款, 浅蓝盖, 袋装, 15,000 xg	25支/袋, 20袋/箱	
CT50RS-L	50 ml 自立底离心管, 防酒精磨砂款, 浅蓝盖, 架装, 3,500 xg	25支/架, 20架/箱	
CT50BS-L	50 ml 自立底离心管, 防酒精磨砂款, 浅蓝盖, 袋装, 3,500 xg	25支/袋, 20袋/箱	
CT15R-L	15 ml 锥底离心管, 防酒精磨砂款, 浅蓝盖, 架装, 15,000 xg	25支/架, 20架/箱	
CT15B-L	15 ml 锥底离心管, 防酒精磨砂款, 浅蓝盖, 袋装, 15,000 xg	25支/袋, 20袋/箱	

PakGent®

为您节约每一滴珍贵的试剂!

莱杰生物科技(苏州)有限公司

苏州铂杰生物科技有限公司

莱杰生物科技(常熟)有限公司

☎ 0512 6670 0017

✉ info@pakgentbio.com

🌐 www.pakgentbio.com.cn